


GAT

**BILANCIA ANALITICA "TOP-LOADING" CON PARAVENTO ALTO SERIE
GAT**

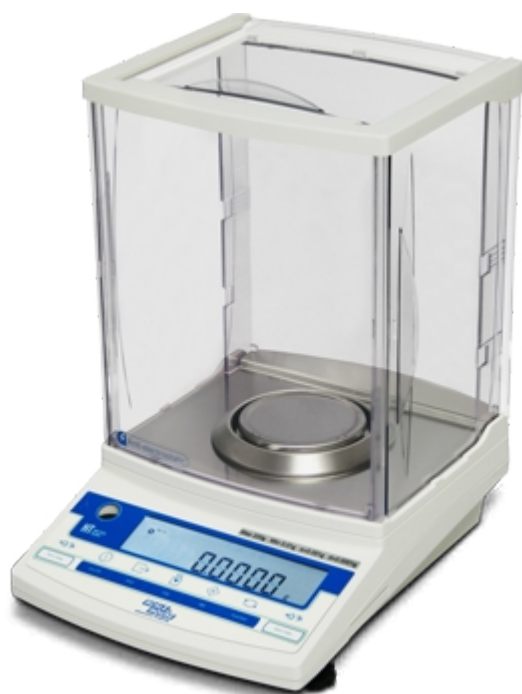

Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi (divisione 10 volte superiore a quella della versione non omologata). DIVISIONE (g): 0,0001. PORTATE (g): 120, 220.

Le nostre soluzioni a garanzia della qualità e della certezza nelle vostre misurazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 8 cifre.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 7 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS.
- Rilevamento del peso tramite diapason.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni Ø 80mm.
- Paravento alto, bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore o stampante.
- Porta DIN8P per collegamento a dispositivi esterni.
- Calibrazione interna.
- A richiesta:
 - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni);
 - gancio per pesata da sotto.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- conversione unità di misura: mg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
- totalizzazione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS



OFFICE

Via Picasso, 18/20
20025 Legnano (MI) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.